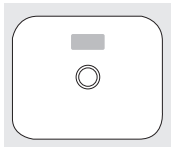


제품 구성 및 사양 COMPONENT & SPEC

제품 구성 / COMPONENT

- 체중계, 사용설명서 (품질보증서)
- Bathroom Scale, Owner's Manual



Scale



User manual

체중계 사양 / SPECIFICATIONS

모델명 Model	HE-90
최대표시(kg) Max.Capacity	150
최소표시(kg) Min.Capacity	4
1논의 값(g) Readability	100

특징
Features

- 고정밀 스트레인 게이지 센서 시스템 탑재
Equipped with high precision strain gauge sensor system.
- 5mm 강화 안전 유리 플랫폼
5mm tempered safety glass platform.
- 자동 파워 제너레이션 컨트롤
Automatic power generation control.
- 무(無) 배터리 기술
Battery-free technology, Environment-friendly.
- 오토 제로 초기화 / 자동 파워 오프
Auto zero resetting / Auto power off
- 전원 부족 / 과부하 표시
Low power / Over-load indication

품질보증서

카스 체중계

본 체중계는 가정용으로 적합하게 설계, 제작되었습니다.
따라서 사용설명서에 명시된 취급주의, 취급경고 등의 지침에 따라
사용하시면 최고의 성능을 유지하실 것을 확신합니다.
본 제품은 폐사의 보증규정과 소비자 보호법 등 관련법에 의거 다음과
같이 보증하여 드립니다.

1. 기록사항(기록하여 보관하세요)

판매점	상호 :	
구입 일자	년	월 일

2. 보증 범위

보증기간 내에 부품의 재질 또는 제조상의 결함에 의한 고장임이
기술적 분석으로 밝혀질 경우, 제품의 수리 및 신품 교환 또는 폐사
인정된 조립품으로 교환하여 드립니다.
본 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.

3. 보증기간

보증기간은 구입 일로 부터 최고 1년간 적용되며 품질보증서 1항의
기록사항이 없을 경우 제품내부에 부착된 제조년월을 기준으로 보증
기간이 만료된 것으로 간주합니다. (유휴 6개월적용)
단, 가정용 체중계를 영업용도나 영업장에서 사용하는 경우에는 보증
기간을 6개월로 적용합니다.

4. 보증수리가 제외되는 사항 (보증기간이내라도 다음 각 사항에 해당되는 경우)

1. 정상적인 계량을 위하여 정기적으로 실시해야 할 점검	중량점검
2. 사용중 소모되는 소모성 부품의 교환	건전지
3. 방문 서비스 및 보증수리시 해당제품의 발송 비용	출장, 택배
4. 일반적인 품질 및 기능상 영향이 없다고 인정되는 관능적 이상	외관, 작동감각
5. 사용설명서에 규정한 주의, 경고 등을 준수하지않아서 발생한 고장임이 확실한 경우	
6. 폐사의 지정 서비스센터 및 A/S 지정점에서 수리하지 않아 발생한 고장	
7. 제품의 임의 변형 및 개조에 의한 고장	
8. 취급, 보관 부주의 및 천재지변에 의한 고장	

5. 보증수리절차

- ▶ 해당 제품과 보증서는 포장박스 안에 적입 되어 있으며, 서비스센터 및 A/S 지정점의 담당자에게 제시하여 주십시오.
- ▶ 폐사에서는 상기 기술한 보증사항에 한해서 처리해 드립니다. 만일 폐사의 서비스 센터 및 A/S 지정점에서 수리를 받은 후 불만사항이 있으시면 카스 고객센터 전화 : 1577-5578 로 연락하여 주시기면 성심껏 지원하여 드리겠습니다.

* HE-33 나무 재질로 인해 여름철 사용 공간의 환경에 따라 Platform이 휘는 현상이 발생 할 수 있습니다.



0-11706102

INSTRUCTIONS FOR USE



디지털 체중계



Digital Personal Scale

제품 사용설명서







Model : HE-90







자동 파워 제너레이션 컨트롤 / 무(無) 배터리 기술 / 친환경

카스고객지원센터 1577-5578

■ 제품의 색상은 실제와 다를 수 있습니다. ■ 당사에서는 고객의 편의를 위한 카스고객지원센터를 운영하고 있습니다.

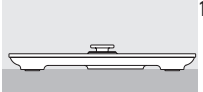
안전을 위한 주의 사항 NOTICE & WARNING


NOTICE	
<p>평평한 곳에서 사용하십시오 Put the scale on a flat and solid surface.</p> 	<p>체중계 가장자리에 올라서지 마세요 Do not stand on the edge.</p> 
<p>체중계 위에서 뛰거나 물건을 던지지 마세요 Avoid sudden shock to the scale.</p> 	<p>유리 파손에 주의 하세요 Watch out of glass breakage.</p> 
<p>허용된 중량을 초과하여 계량 하지마세요 Do not overload beyond the maximum weight limit.</p> 	<p>발이 미끄러운 상태로 발판위에 올라서지 마세요 The glass platform will be slippery when it is wet. Keep it dry!</p> 


WARNING	
<p>분해, 수리, 개조는 절대로 하지마세요 Do not disassemble the scale.</p> 	<p>체중계를 잡고 끌지 마세요 Grab on the bottom of the scale when moving.</p> 
<p>급격한 온도 변화나 진동이 심한 곳에서는 사용하지 마세요 Place the scale on firm and temperature consistent environment.</p> 	<p>제품의 외부에 물을 뿌리거나, 습한 곳에서 사용하지 마세요 To reduce electric shock or incorrect reading, Do not spill water on the scale or place it in humid condition.</p> 
<p>과다한 전자기파가 발생하는 곳에서는 설치하지 마세요 Keep the scale away from other electromagnetic generating devices.</p> 	<p>직사광선에 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 물건 가까이 놓지마세요 Avoid placing the scale near heater or in direct sunlight.</p> 

사용방법 OWNER'S MANUAL

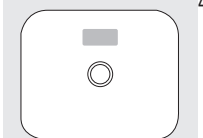
체중계 사용방법 / OPERATION

- 

1. 체중계를 단단하고 평평한 바닥에 저울을 놓습니다.
Put the scale on a hard & flat surface.
- 

2. "0.0"이 표시될 때까지 "U-Power" 버튼을 눌러 저울 스위치를 켭니다.
Switch on the scale by push on the button U-Power, till "0.0" appear.
- 

3. 잠시 기다리시면, 다음과 같이 체중계에 정확한 무게가 표시됩니다.
Gently step on the scale, then the scale will be automatically turned on. Stand evenly on the scale without moving and wait until your weight shown on display is stable and locked.

8888g ▶ 00g ▶ 48.2g
- 

4. 전원이 고갈될 때까지 저울은 꺼지지 않습니다.
The scale will power off automatically until no power.

* 무게가 약간 다를 경우 다시 시도해 보십시오.
Please retry the scale when the weight is a bit different.

* 주의 : 반드시 "0.0kg"이 표시된 후 저울에 올라서십시오.

NOTE : Please do not step on the scale until the display show "0.0kg"

사용시 주의사항 ADVISE FOR USE & CARE

전원 부족 표시 / LOW POWER INDICATION



1. 디스플레이에 "0.0"가 뜰 경우, 2초 후 자동으로 꺼집니다.
"U-Power" 버튼을 다시 한 번 살짝 눌러주십시오.
When the screen indicates "0.0" it will turn off automatically after 2 seconds. Please quick push one time on the button again "U-Power" new battery.

사용범위 초과표시 / OVERLOAD INDICATION



- 저울 하중이 초과되면(150kg 이상) 디스플레이에 "Err"이 뜹니다
When the scale is over-loaded (more than 150kg), the screen will appear "Err".